

ARAHAN SWAB KENDIRI

UNTUK KIT UJIAN PANTAS ANTIGEN BD VERITOR



JANGAN TERUSKAN JIKA:



Hidung berdarah dalam masa **24 jam** lepas


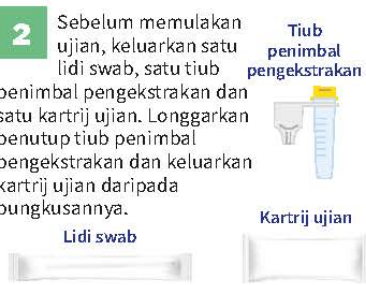




Pembedahan hidung dalam masa **4 minggu** lepas





Terdapat kecederaan di muka dalam masa **8 minggu** lepas

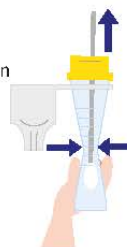



PROSEDUR SWAB


- 1 Sila bersihkan tangan anda sebelum memulakan ujian. 
- 2 Sebelum memulakan ujian, keluarkan satu lidi swab, satu tiub penimbal pengestrakan dan satu kartrij ujian. Longgarkan penutup tiub penimbal pengestrakan dan keluarkan kartrij ujian daripada bungkusannya. 

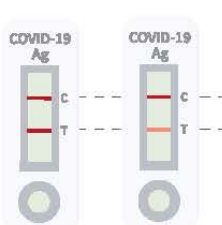
Lidi swab Tiub penimbal pengestrakan Kartrij ujian
- 3 Keluarkan lidi swab daripada bungkusannya. 
- 4 Masukkan lidi swab ke dalam lubang hidung (~2.5cm). Putarkan lidi swab sebanyak 5 kali dan biarkannya berada di dalam lubang hidung selama 5 saat. 

2.5cm
- 5 Ulangi untuk lubang hidung yang lain dengan lidi swab yang sama. 

2.5cm
- 6 Masukkan lidi swab ke dalam tiub penimbal pengestrakan untuk digaulkan. Benamkan dan gerakkan (naik turun) lidi swab selama 15 saat. 

15 SAAT
- 7 Picit tiub penimbal pengestrakan semasa menarik lidi swab keluar. 
- 8 Tutup penutup tiub penimbal pengestrakan dengan rapat. Anda seharusnya mendengar bunyi "klik". 
- 9 Gunakan jari anda untuk mengetuk bahagian tepi tiub beberapa kali dengan perlahan-lahan. Tindakan ini membantu mencampurkan larutannya. 
- 10 Letakkan 3 titis larutan ke telaga sampel kartrij ujian. 

3 TITIS
- 11 Tunggu selama 15 minit sebelum memeriksa keputusan pada kartrij ujian. Sila letakkan kartrij pada permukaan yang rata sepanjang tempoh ini. 

15 MINIT
- 12 Baca keputusan pada kartrij ujian. Jika anda melihat garisan muncul pada kedudukan "C" dan "T", ini menunjukkan ujian positif. Sila berjumpa doktor anda. 

POSITIF

"C" Garisan Kawalan "T" Garisan Ujian

Jika anda melihat garisan muncul hanya pada kedudukan "C", ini menunjukkan ujian negatif.


Jika anda melihat garisan muncul hanya pada kedudukan "T" atau tiada apa-apa garisan, ujian adalah tidak sah. Sila ulangi ujian pada kit ujian yang lain.


NEGATIF

"C" Garisan Kawalan "T" Garisan Ujian

TIDAK SAH

"C" Garisan Kawalan "T" Garisan Ujian

- 13 Buang semua alat yang telah dipakai dalam kit ujian ke dalam satu beg plastik dan ikat dengan gelang getah atau pengikat kabel. Letakkan beg yang sudah diikat ke dalam satu lagi beg plastik dan ikat beg plastik kedua ini dengan gelang getah atau pengikat kabel. Buang ke dalam corong sampah dengan segera. 

- 14 Bersihkan tangan anda selepas ujian. 

Anda juga boleh merujuk kod QR ini untuk mendapatkan arahan video



<https://www.gov.sg/instructions>