

# 拭子自检指南

## 适用于 BD VERITOR 抗原快速检测




如有下述情况  
请勿自行检测:



有在过去  
24小时内  
流鼻血



最近  
四周内动过  
鼻腔手术

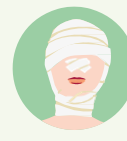


最近  
八周内脸部  
受过创伤

## 拭子检测步骤

**1** 开始检测之前，请洗净双手。



**2** 开始检测之前，请取出拭子、提取缓冲管和检测盒。松开提取缓冲管的盖子，并除去检测盒的包装袋。

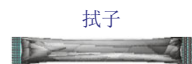


提取  
缓冲管  
检测盒

**3** 从包装袋中取出拭子。



**4** 用拭子深入鼻孔约公分，转动下，然后在鼻孔内停留秒。

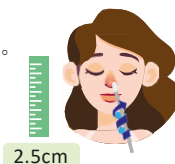


2.5cm

**5** 用同一根拭子在另一个鼻孔内重复同样的动作。




2.5cm

**6** 将拭子插入提取缓冲管与溶液混合，并把拭子上下摇动秒。

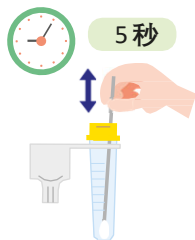

5秒

**7** 一边挤压提取缓冲管，一边取出拭子。

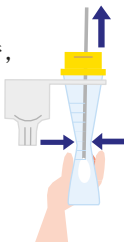

**8** 盖紧提取缓冲管的盖子。听到“咔嗒”声即表示已盖紧。



**9** 用手指轻轻敲击管壁几次以混合溶液。



**10** 将滴溶液滴入检测盒的样本孔内。



滴

**11** 分钟过后，即可查看检测盒上显示的检测结果。全程请确保检测盒平放。



5分钟


**12** 读取检测盒上显示的检测结果。如果您看到和的位置都出现了线条，即表示检测结果呈阳性。请看医生就医。

如果您只看到的位置出现了线条，即表示检测结果呈阴性。

如果您只看到的位置出现了线条或完全没有出现线条，即表示检测无效。请用另一个自检盒重新检测。


阳性

对照线  
检测线

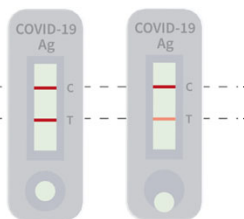


阴性

对照线  
检测线

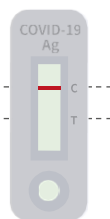

无效

对照线  
检测线

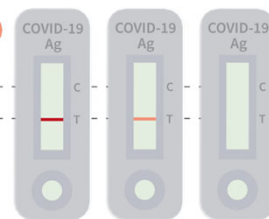

**13** 将使用过的所有物品放入一个塑料袋或可密封袋中密封起来。然后把密封好的塑料袋放入另一个塑料袋中，用橡皮筋或扎带将外层的塑料袋口绑好。事毕立即把它扔进垃圾槽或脚踏式垃圾桶。



**14** 完成检测后，记得洗净双手。



您也可  
扫描二维码  
参考检测  
步骤视频



<https://go.gov.sg/veritor-instructions>



MINISTRY OF HEALTH  
SINGAPORE